


妥協のない高性能プローベ、誕生。

これまでの蓄積データからケン・メディカル独自の安全性・耐久性・操作性に拘り、真の高性能と呼べるものをめざしました。

そんな意志が理想的なカタチで結実し、うわべだけでない本物のプローベを創り上げました。

妥協のない高性能ケン・ DISPOSABLE 吸引灌流プローベ、誕生しました。

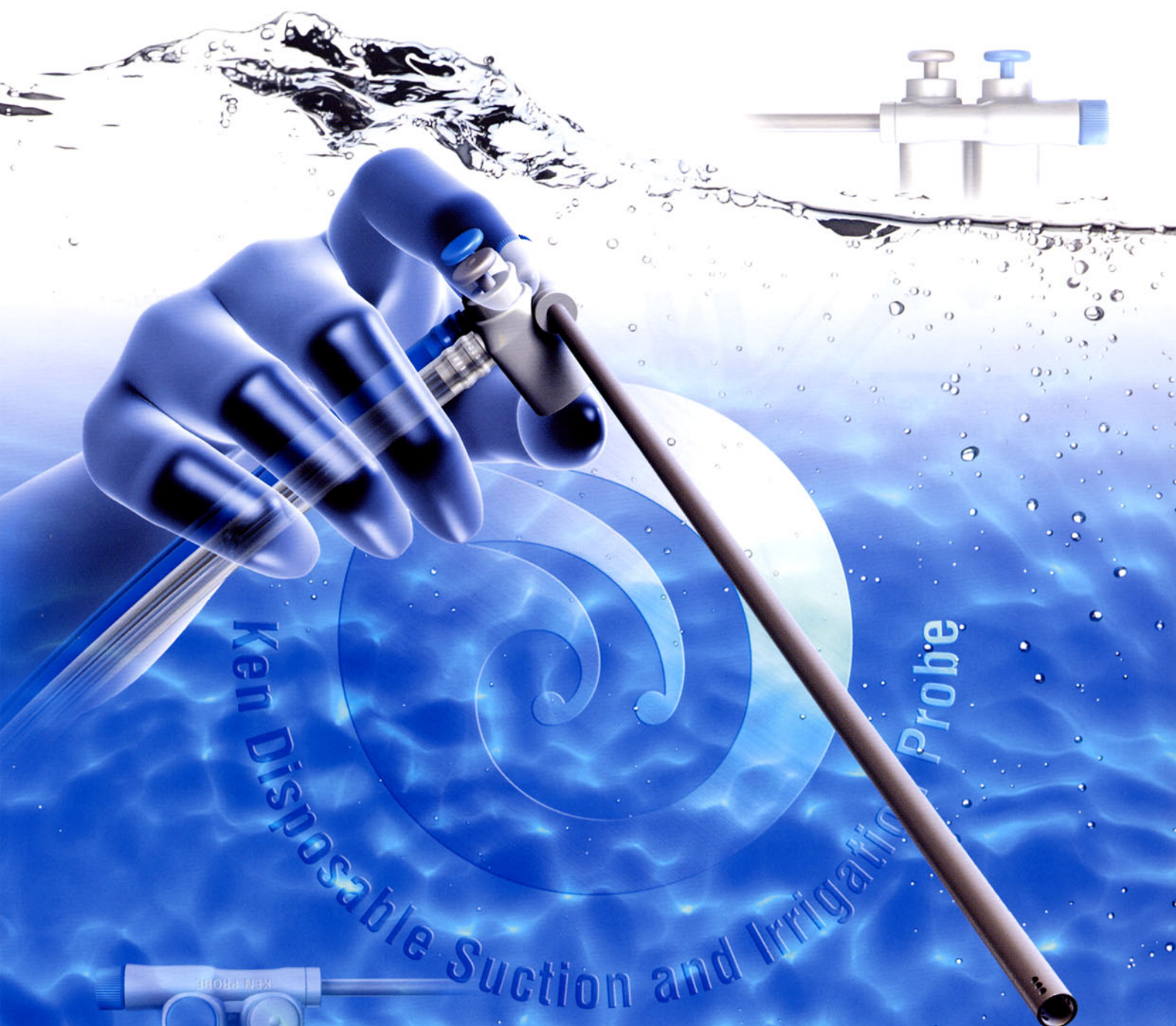

ケン・ DISPOSABLE 吸引灌流プローベ

ケン・メディカル株式会社

Ken Disposable Suction And Irrigation Probe

今までのプローベに足りなかったもの

ケン・ディスポーザブル吸引灌流プローベは、見逃されがちな小さな配慮を随所に取り入れ、今までのプローベにはない優れた操作性と確かな技術で創り上げました。

Check Probe 1

シャフト部分をマット加工仕上する事により、手術中のハレーション光を低減させる事が出来ます。

Check Probe 2

吸引部分のピストン上部に『小さな突起』を配置し、指先の感触で‘吸引側’と認識が出来るようになりました。

Accessory

付属のアダプターに付け替える事によりシリンジで腹水を吸引する事も可能です。



タブインサート

Check Probe 3

独自のスパイク部分開発により、生理食塩水への穿刺が容易になりました。

Check Probe 4


生理食塩水側のチューブを色分け(ブルー)した事により、手術前のセッティングがスムーズに行えます。

ケン・ディスポーザブル吸引灌流プローベ

ケン・ディスポーザブル吸引灌流プローベは〈ハンドピース・チューブ・シャフト〉一体型の腹腔鏡用吸引灌流プローベです。また、生理食塩水加圧装置(別売)に接続して使用する事により、高性能なイリゲーションシステムとしても御利用頂けます。

品名/ケン・ディスポーザブル吸引灌流プローベ 品番/KP-8000 個数/1箱5本入 承認番号 21600BZZ00056000

※本製品はディスポーザブル製品につき再滅菌・再使用はしないで下さい。※仕様・形状・価格については、改良等の理由により予告なく変更することがあります。

 ケン・メディカル株式会社

本社：〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目22番18号
TEL 06 (4962) 5060 (代表) FAX 06 (4962) 5070

東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島4丁目5番7号 目黒ビル
TEL 03 (3818) 6621 (代表) FAX 03 (3818) 6595

製造元：吉川化成株式会社
〒538-0052 大阪府鶴見区横堤5丁目6番34号

取扱代理店